

Parsons Grab Bar Installation

Parsons ADL Grab Bars have been designed, engineered and manufactured to provide safety in your bathroom.

****** It is recommended that this product be installed by a qualified or experienced individual to ensure proper and secure installation. Obligation of the supplier and the manufacturer is limited to performance **ONLY** when the bar has been installed properly. No other obligations are assumed by the supplier or the manufacturer.

INSTALLATION:

1. Locate the wall studs where the grab bar will be installed and mark the centerline of each stud.
NOTE: Grab bars must be anchored into wall studs to safely support body weight. Rust resistant screws are included. Designed for use with 3/16" diameter fasteners.
2. Hold the grab bar against the wall at the desired height and angle.
3. Align the mounting flange holes with the stud centerline marks. Use a level to ensure the grab bar is straight.
4. Mark the locations of the mounting holes on the wall through the flange.
NOTE: At least 2 of the 3 mounting holes must be used when mounting horizontally or angled, to ensure the bar stays attached to the wall.
5. Remove the grab bar from the wall and drill pilot holes at the marked locations using an appropriate drill bit. Drill deep enough to penetrate the stud.
6. Place the grab bar back against the wall, aligning the flange holes with the pilot holes. Insert the screws through the appropriate holes in the mounting flange and tighten them securely.
7. For the second side of the grab bar, repeat the marking, drilling and fastening steps above.
8. Ensure the grab bar is level and all screws are firmly tightened. Check that it does not move or loosen when pressure is applied.

Instructions d'installation – Barre d'appui Parsons




Les barres d'appui Parsons ADL ont été conçues, développées et fabriquées pour assurer votre sécurité dans la salle de bain.

Il est recommandé que ce produit soit installé par une personne qualifiée ou expérimentée afin d'assurer une installation adéquate et sécuritaire. L'obligation du fournisseur et du fabricant se limite **UNIQUEMENT** au rendement lorsque la barre a été correctement installée. Aucune autre responsabilité n'est assumée par le fournisseur ou le fabricant.

INSTALLATION :

1. Repérez les montants muraux à l'endroit où la barre d'appui sera installée et marquez le centre de chaque montant.
REMARQUE : Les barres d'appui doivent être fixées dans des montants muraux pour supporter le poids du corps en toute sécurité. Des vis résistantes à la rouille sont incluses. Conçu pour être utilisé avec des fixations de diamètre 3/16 po.
2. Placez la barre d'appui contre le mur à la hauteur et à l'angle désirés.
3. Alignez les trous de la bride de fixation avec les marques du centre des montants. Utilisez un niveau pour vous assurer que la barre est droite.
4. Marquez l'emplacement des trous de fixation sur le mur à travers la bride.
REMARQUE : Au moins 2 des 3 trous de fixation doivent être utilisés lors d'une installation horizontale ou en angle afin d'assurer que la barre reste solidement fixée au mur.
5. Retirez la barre du mur et percez des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'un foret approprié. Percez suffisamment profondément pour atteindre le montant.
6. Remplacez la barre d'appui contre le mur en alignant les trous de la bride avec les avant-trous. Insérez les vis dans les trous appropriés de la bride de fixation et serrez-les solidement.
7. Pour l'autre extrémité de la barre d'appui, répétez les étapes de marquage, perçage et fixation ci-dessus.
8. Assurez-vous que la barre est de niveau et que toutes les vis sont bien serrées. Vérifiez qu'elle ne bouge pas et ne se desserre pas lorsqu'une pression est appliquée.

Rotating Flange
Bride rotative

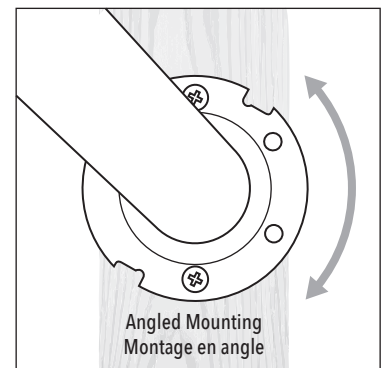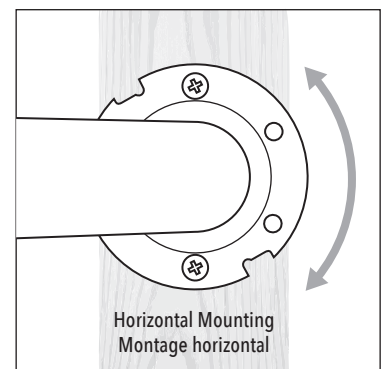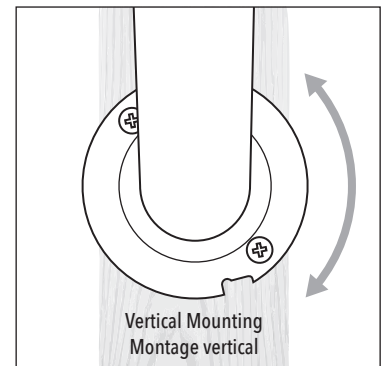

www.parsonsadl.com
Parsons is a brand of KEGO.
Parsons est une marque de KEGO.
KEGO Corporation
4350 Castleton Road, Unit 3-4
London, ON N6N 0A3
www.kegocorp.com